

ZOLL® AED Plus®: ulotka z instrukcjami dla użytkownika



Ważne: Ten symbol oznacza, że urządzenie AED Plus jest przystosowane do leczenia pacjentów dorosłych i pediatrycznych. Urządzenie AED Plus bez tego symbolu nie jest przystosowane do leczenia pacjentów pediatrycznych i *nie będzie działać* z elektrodami pediatrycznymi Pedi-padz® II. Aby zmodernizować urządzenie AED Plus w taki sposób, by możliwa była praca z elektrodami ZOLL Pedi-padz II, należy skontaktować się z firmą ZOLL Medical Corporation lub autoryzowanym przedstawicielem firmy ZOLL w celu uzyskania informacji o zestawie modernizacyjnym ZOLL AED Plus Pediatric Upgrade Kit.

Jeśli urządzenie AED Plus jest przystosowane do leczenia pacjentów dorosłych i pediatrycznych, po podłączeniu kabla elektrod dla dorosłych urządzenie AED Plus automatycznie przełączy się we właściwy dla dorosłych tryb wykrywania rytmu serca i automatycznego wyboru energii wyładowania (120 J, 150 J, 200 J), wygenerowany zostanie odpowiedni komunikat głosowy, a na wyświetlaczu pojawi się napis **ELEKTRODY DLA DOROSŁEGO**. Po podłączeniu kabla elektrod pediatrycznych ZOLL Pedi-padz II urządzenie AED Plus przełączy się automatycznie we właściwy dla dzieci tryb wykrywania rytmu serca i automatycznego wyboru energii wyładowania (50 J, 70 J, 85 J), wygenerowany zostanie odpowiedni komunikat głosowy, a na wyświetlaczu pojawi się napis **ELEKTRODY DLA DZIECKA**.

Naklejanie elektrod Pedi-padz II (dla niemowląt/dzieci)


Przed przymocowaniem elektrod Pedi-padz II należy przygotować pacjenta.

Aby przygotować pacjenta:

1. Zdjąć ubranie zasłaniające klatkę piersiową pacjenta.
2. Upewnić się, że klatka piersiowa pacjenta jest sucha.

Aby nakleić elektrody Pedi-padz II:

1. Rozedrzeć opakowanie elektrod i rozwinąć opakowanie wewnętrzne, aby odsłonić elektrody. Umieścić elektrody na ciele pacjenta zgodnie z ilustracją na opakowaniu elektrod.
2. Zdjąć okrągłą elektrodę z materiału podkładowego i umieścić ją na klatce piersiowej pacjenta (zgodnie z ilustracją zamieszczoną na opakowaniu elektrody).
3. Położyć dłoń na krawędzi elektrody i drugą dłonią delikatnie rozwinąć elektrodę na klatkę piersiową pacjenta, wyciskając przy tym ewentualne powietrze spod elektrody.
4. Obrócić pacjenta na brzuch, zdjąć prostokątną elektrodę z materiału podkładowego i umieścić ją na plecach pacjenta (zgodnie z ilustracją zamieszczoną na opakowaniu elektrody).
5. Położyć dłoń na krawędzi elektrody i drugą dłonią delikatnie rozwinąć elektrodę na skórę pacjenta, wyciskając przy tym ewentualne powietrze spod elektrody.
6. Ułożyć pacjenta na plecach i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez urządzenie ZOLL AED Plus.

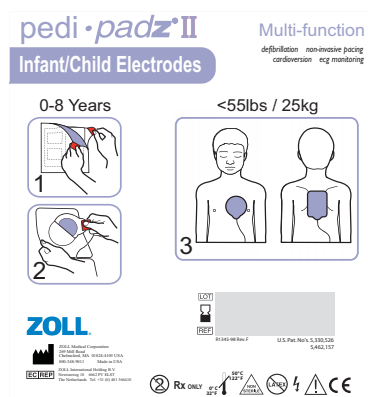

UWAGA Elektrod Pedi-padz II (dla niemowląt/dzieci) można również używać ze stymulatorami serca ZOLL, do stymulacji trwającej maksymalnie jedną godzinę (informacje na temat stymulacji serca można znaleźć w podręczniku *M Series Operator's Guide*).

Wskazania

Urządzenia AED Plus należy używać w sytuacji, gdy u osoby poszkodowanej z podejrzeniem zatrzymania serca występuje ewidentne **ZATRZYMANIE KRAŻENIA**, na które wskazują następujące objawy występujące łącznie:

- utrata przytomności,
- brak prawidłowego oddychania,
- brak tętna lub objawów krążenia.

Jeśli pacjent nie ma ukończonych 8 lat i waży mniej niż 25 kg (55 funtów), urządzenia ZOLL AED Plus należy używać z elektrodami pediatrycznymi ZOLL AED Plus. Ze względu na wiek i wagę pacjenta terapia nie powinna być opóźniana.