

Saver EVO[®]

Podręcznik użytkownika

1.3.0

Spis treści

Saver EVO – Instrukcja obsługi dla użytkownika	3
Pobieranie ze strony internetowej	3
Skrócona instrukcja obsługi	3
Korzystanie z oprogramowania Saver EVO	4
Korzystanie z oprogramowania Saver EVO z defibrylatorem HeartSine samaritan PAD	5
Pobieranie informacji o zdarzeniach z urządzenia HeartSine samaritan PAD	6
Wyświetlanie zdarzeń z urządzenia HeartSine samaritan PAD	7
Kasowanie pamięci urządzenia HeartSine samaritan PAD	8
Zmiana ustawień urządzenia HeartSine samaritan PAD	8
Korzystanie z oprogramowania Saver EVO z PDU*	11
Pobieranie danych zdarzenia z karty pamięci PDU	12
Wyświetlanie zdarzeń zapisanych na karcie pamięci PDU	13
Podgląd ustawień PDU	14
Korzystanie z oprogramowania Saver EVO z zapisanymi zdarzeniami	15
Eksport i import	15
Aby eksportować zdarzenia	15
Aby importować zdarzenia	16
Aby usunąć zapisane zdarzenia	16
Zmiana ustawień oprogramowania Saver EVO	17
Aby zmienić hasło	17
Aby zmienić język oprogramowania Saver EVO	18
Aby sprawdzić dostępność automatycznych aktualizacji	19
Cyberbezpieczeństwo	19

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią zobowiązania firmy HeartSine Technologies. Ltd. Bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy HeartSine Technologies Ltd. żadna część niniejszej Instrukcji nie może być powielana ani przesyłana, w żadnej postaci, przy użyciu jakichkolwiek metod - elektronicznych lub mechanicznych, co dotyczy także zakazu jej kopiowania i utrwalania.

heartsine.com
heartsinesupport@stryker.com

Saver EVO – Instrukcja obsługi dla użytkownika

Oprogramowanie Saver EVO® pozwala na pobranie danych zdarzenia defibrylacji z urządzenia HeartSine® samarytanin® Karta pamięci PAD i karty pamięci PDU. Oprogramowanie Saver EVO pozwala również na zarządzanie danymi zdarzeń zapisanymi w komputerze w odniesieniu do drukowania, importowania i eksportowania danych zdarzeń do innych użytkowników oprogramowania Saver i Saver EVO.

Oprogramowanie Saver EVO jest dostarczane z licencją na oprogramowanie umożliwiającą instalację i korzystanie z oprogramowania na jednym komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows (najlepiej Windows 10).

Pobieranie ze strony internetowej

Instalacja oprogramowania Saver EVO może wymagać zgody administratora – w razie potrzeby skontaktuj się z administratorem systemu/dostawcą usług informatycznych.

1. Przejdź do strony HeartSine.com, aby pobrać oprogramowanie Saver EVO przeznaczone dla Twojego regionu.
2. Po pobraniu uruchom plik „ SaverEVO_setup.exe”, aby zainstalować oprogramowanie Saver EVO. (Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.)
3. Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika. Aby zainstalować to oprogramowanie, musisz zaakceptować warunki tej umowy. Aby zaakceptować warunki, kliknij przycisk „Next” (Dalej).
4. Oprogramowanie Saver EVO zostanie zainstalowane w domyślnej lokalizacji ze standardową konfiguracją. Aby zaakceptować, kliknij przycisk „I agree” (Zgadzam się). Te ustawienia domyślne nie powinny być zmieniane, chyba że jesteś doświadczonym użytkownikiem komputera.
5. W przypadku wyświetlenia pytania o certyfikację sterownika urządzenia kliknij przycisk „Continue anyway” (Mimo to kontynuuj).

Skrócona instrukcja obsługi

Aby pobrać zarejestrowane dane zdarzenia defibrylacji z urządzenia HeartSine samaritan PAD lub karty pamięci PDU.

1. Podłącz odpowiednie urządzenie do komputera.
2. Otwórz oprogramowanie Saver EVO.

3. Kliknij przycisk  lub przycisk .

4. Kliknij przycisk , aby wyświetlić listę zapisanych zdarzeń.

5. Podświetl żądane zarejestrowane zdarzenie z listy.


6. Kliknij przycisk , aby wyświetlić zdarzenie.

7. Kliknij przycisk  i wprowadź wymagane dane pacjenta, aby zapisać zdarzenie w komputerze.

8. W razie potrzeby kliknij przycisk , aby wydrukować rekord zdarzenia.

Korzystanie z oprogramowania Saver EVO

Poniżej przedstawiono ekran startowy oprogramowania Saver EVO.

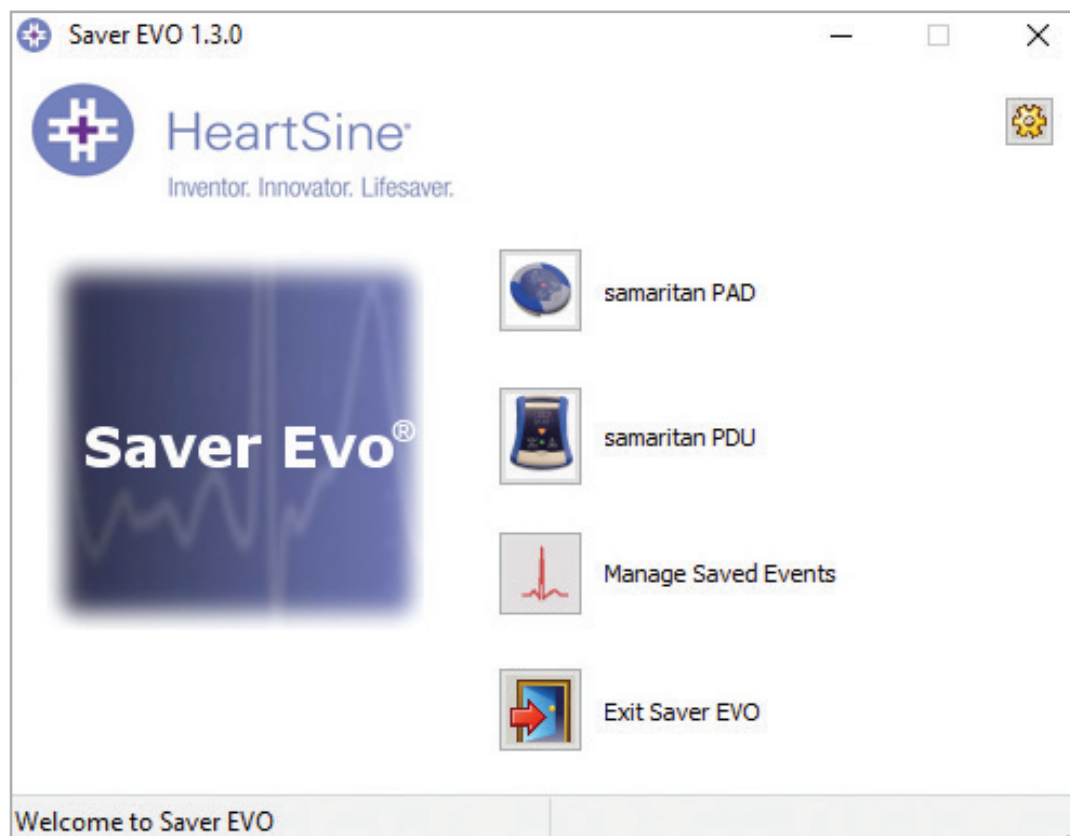

Ekran startowy oprogramowania Saver EVO



samaritan PAD – Opcja służy do otwierania menu funkcji specyficznych dla HeartSine samaritan PAD. Szczegóły znajdują się na stronie 5.



samaritan PDU – Opcja służy do otwierania menu funkcji specyficznych dla karty pamięci PDU. Szczegóły znajdują się na stronie 12.



Manage Saved Events (Zarządzaj zapisanymi zdarzeniami) – Opcja służy do otwierania menu funkcji specyficznych dla zdarzeń zapisanych w komputerze. Szczegóły znajdują się na stronie 16.



Exit Saver EVO (Zakończ Saver EVO) – Powoduje zakończenie pracy z oprogramowaniem Saver EVO.



Change Saver EVO password (Zmień hasło do Saver EVO) – Funkcja służy do ustawienia hasła do oprogramowania Saver EVO i otwarcia opcji wyboru języka. Funkcja umożliwia również przeglądanie informacji o wersji oprogramowania Saver EVO.

Korzystanie z wyżej wymienionych menu zostaną szczegółowo omówione poniżej.

Korzystanie z oprogramowania Saver EVO z defibrylatorem HeartSine samaritan PAD

Aby korzystać z oprogramowania Saver EVO z defibrylatorem HeartSine samaritan PAD, konieczny jest kabel USB do transmisji danych (może znajdować się w zestawie dostarczonego defibrylatora HeartSine samaritan PAD). Jeśli nie masz kabla, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub autoryzowanym dystrybutorem firmy Stryker. Jeśli do urządzenia AED podłączona jest bramka HeartSine Gateway, można użyć kabla micro USB.

1. Kabel USB do transmisji danych podłącz do urządzenia HeartSine samaritan PAD i portu USB komputera. Otwórz oprogramowanie Saver EVO.
2. Kliknięcie przycisku samaritan PAD spowoduje otwarcie niżej przedstawionego okna.



Ekran dostępu do Saver EVO PAD



PAD Data (Dane PAD) – Ten przycisk służy do pobierania danych zdarzeń z defibrylatora HeartSine samaritan PAD. Szczegóły znajdują się na stronie 6.




Change PAD Settings (Zmień ustawienia PAD) – Ten przycisk służy do uruchomienia testów diagnostycznych lub zmiany konfiguracji (objętość i czas) urządzenia HeartSine samaritan PAD. Szczegóły znajdują się na stronie 8.



Back (Wstecz) – Przycisk służy do powrotu do ekranu startowego Saver EVO.

Pobieranie informacji o zdarzeniach z urządzenia HeartSine samaritan PAD

Aby pobrać dane zdarzeń defibrylacji z urządzenia HeartSine samaritan PAD, sprawdź, czy HeartSine samaritan PAD jest podłączony do komputera, a następnie kliknij przycisk PAD Data (Dane PAD). Spowoduje to przeszukanie pamięci urządzenia HeartSine samaritan PAD oraz wyświetlenie listy wszystkich zarejestrowanych zdarzeń, jak pokazano poniżej.

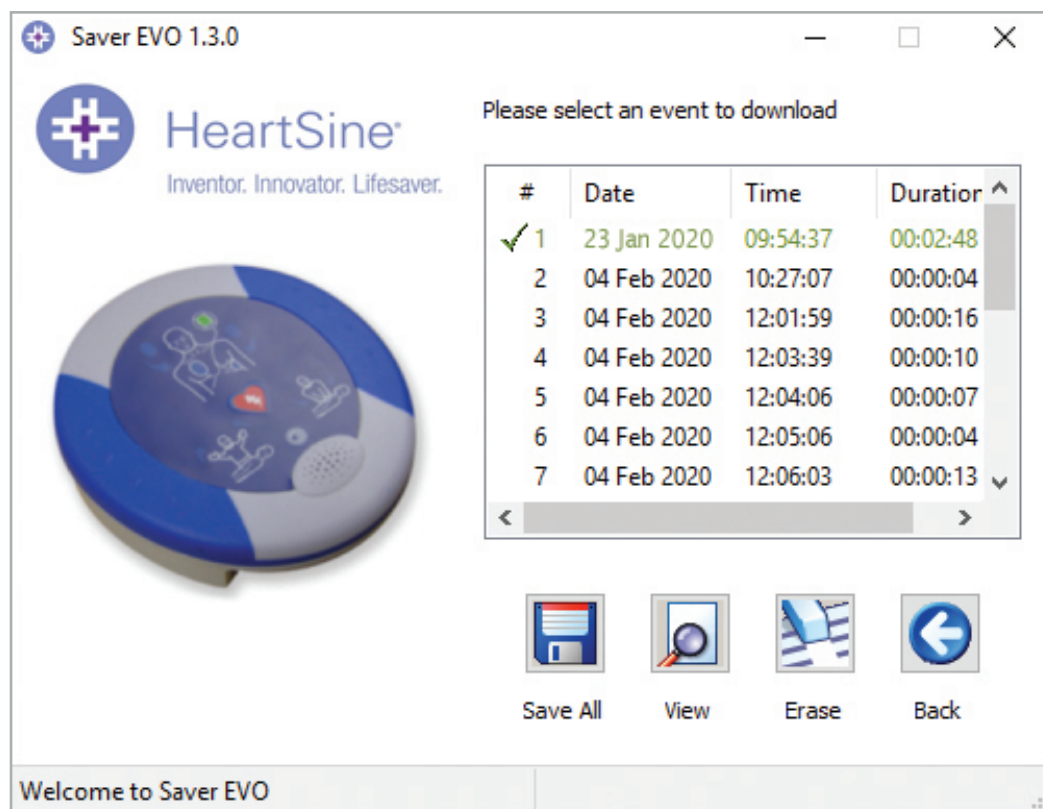

Ekran listy dziennika zdarzeń Saver EVO PAD

Zdarzenia wyświetlone w kolorze zielonym i oznaczone symbolem ✓ to zdarzenia, które zostały wcześniej zapisane w komputerze.



Save All (Zapisz wszystko) – Przycisk Save All (Zapisz wszystko) służy do zapisania wszystkich zdarzeń znajdujących się w dzienniku zdarzeń PAD w komputerze w jednym pliku.

UWAGA: W tej wersji oprogramowania Saver EVO zdarzenia zapisane tą metodą nie mogą zostać pobrane do przeglądania. Aby pobrać zdarzenia z tego pliku, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy HeartSine Technologies. Aby zapisać zdarzenia indywidualnie do późniejszego wykorzystania, zapoznaj się z funkcją „Save” (Zapisz) przedstawioną w punkcie **Wyświetlanie zdarzeń z urządzenia HeartSine samaritan PAD** na stronie 7.



View (Wyświetl) – Przycisk służy do wyświetlenia wybranego zdarzenia.




Erase (Skasuj) – Przycisk powoduje usunięcie wszystkich zdarzeń z dziennika zdarzeń urządzenia HeartSine samaritan PAD. Szczegółowe informacje dotyczące kasowania danych znajdują się na stronie 8.



Back (Wstecz) – Przycisk służy do powrotu do ekranu startowego Saver EVO PAD.

Wyświetlanie zdarzeń z urządzenia HeartSine samaritan PAD

1. Aby wyświetlić zdarzenie, zaznacz je na liście, a następnie kliknij przycisk View (Wyświetl). Spowoduje to wyświetlenie zdarzenia defibrylacji wraz z zapisem EKG i dziennika zdarzeń w jednym oknie podglądu.

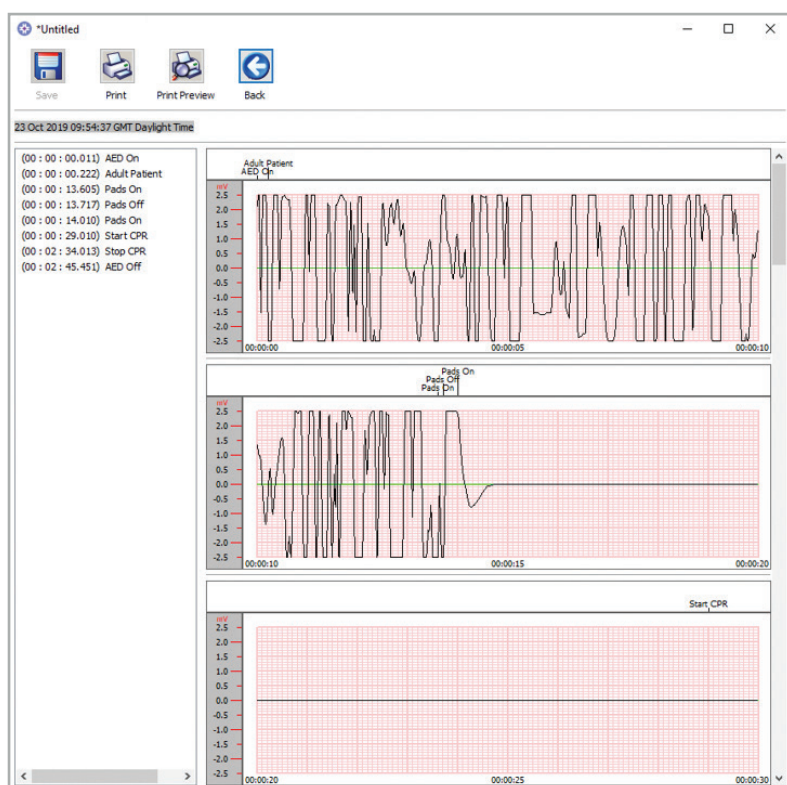

Okno podglądu zdarzeń oprogramowania Saver EVO PAD

2. Można teraz zapisać to wyświetlone zdarzenie w komputerze, klikając przycisk Save (Zapisz). Zapisane w ten sposób zdarzenia można odzyskać i przeglądać w oprogramowaniu Saver EVO. Zapewnia to opcje wprowadzania informacji umożliwiających identyfikację pacjenta z listy zapisanych zdarzeń w komputerze. Dane dotyczące pacjenta mogą składać się ze znaków alfanumerycznych oraz każde pole można wypełnić lub w razie potrzeby pozostawić puste.

Okno danych pacjenta Saver EVO PAD

UWAGA: Po zapisaniu danych zdarzenia defibrylacji w komputerze nie można ich zmienić.

Okno podglądu zdarzeń Saver EVO zawiera również następujące przyciski:



Print (Drukuj) – Przycisk służy do drukowania zdarzenia aktualnie wyświetlanego w oknie widoku.



Print Preview (Podgląd wydruku) - Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić podgląd danych wydruku na ekranie.



Back (Wstecz) – Przycisk służy do powrotu do ekranu listy zdarzeń Saver EVO PAD.

Kasowanie pamięci urządzenia HeartSine samaritan PAD

1. Aby skasować pamięć urządzenia HeartSine samaritan PAD, kliknij przycisk Erase (Skasuj).
2. W celu zachowania ostrożności przed skasowaniem pamięci Saver EVO poprosi o podanie hasła. Po wpisaniu poprawnego hasła pamięć urządzenia HeartSine samaritan PAD zostanie skasowana. Aby uzyskać informacje na temat zmiany domyślnego hasła, patrz punkt **Zmiana hasła w Saver EVO** na stronie 17.

Zaleca się, aby po pobraniu danych zdarzenia z urządzenia HeartSine samaritan PAD i zapisaniu ich w komputerze, zdarzenia te zostały usunięte z pamięci urządzenia HeartSine samaritan PAD. Zapewni to dostępność całej pamięci do zapisu danych z innego zdarzenia defibrylacji.

PRZESTROGA: Firma HeartSine zaleca, aby pobrać całą pamięć urządzenia HeartSine samaritan PAD przed jej skasowaniem. Informacje te powinny być bezpiecznie przechowywane w celu ich przyszłego wykorzystania.

Zmiana ustawień urządzenia HeartSine samaritan PAD

Przycisk Change PAD Settings (Zmień ustawienia PAD) pozwala użytkownikom skonfigurować niektóre funkcje urządzenia HeartSine samaritan PAD w następujący sposób:

- Sprawdź/ustaw godzinę
- Uruchom testy diagnostyczne

Ponadto użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mogą zmienić następujące elementy:

- Głośność
- Włącz/wyłącz dźwięk metronomu

1. Kliknięcie przycisku Change PAD Settings (Zmień ustawienia PAD) spowoduje przejście do następującego ekranu (patrz następna strona):



Okno Change PAD Settings (Zmień ustawienia PAD) oprogramowania Saver EVO

2.  **Check/Set PAD time** – Ten przycisk pozwala użytkownikom zsynchronizować godzinę urządzenia HeartSine samaritan PAD z godziną w komputerze.



Okno Saver EVO check/set PAD (Zmień/ustaw PAD oprogramowania Saver ECO)

3. Kliknij przycisk Synchronize (Synchronizuj), aby ustawić godzinę urządzenia HeartSine samaritan PAD na tę samą godzinę, co w komputerze, do którego jest podłączone.
4. Kliknij przycisk Close (Zamknij), aby powrócić do okna Saver EVO Change PAD Settings (Zmień ustawienia PAD oprogramowania Saver EVO).



Run Diagnostic Tests (Uruchom testy diagnostyczne) – Ten przycisk pozwala użytkownikowi na uruchomienie podstawowych testów w celu sprawdzenia, czy urządzenie HeartSine samaritan PAD działa. Lista dostępnych testów diagnostycznych jest wyświetlana na rozwijanym menu, jak pokazano poniżej.




Okno Saver EVO PAD diagnostics tests (Testy diagnostyczne PAD oprogramowania Saver EVO)

Oprogramowanie Saver EVO zidentyfikuje typ podłączonego urządzenia PAD i wyświetli odpowiednie ilustracje na etykietach w celu pokierowania użytkownika podczas testów.



Edit PAD Configuration (Edytuj konfigurację PAD) – Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno Edit PAD configuration (Edytuj konfigurację PAD) (pokazane poniżej), w którym możesz przeglądać i zmieniać ustawienia głośności i metronomu oraz przeglądać wersję oprogramowania podłączonego urządzenia HeartSine samaritan PAD. Aby potwierdzić te zmiany, użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła do oprogramowania Saver EVO. Aby uzyskać informacje na temat zmiany domyślnego hasła, patrz punkt **Zmiana hasła w Saver EVO** na stronie 17.

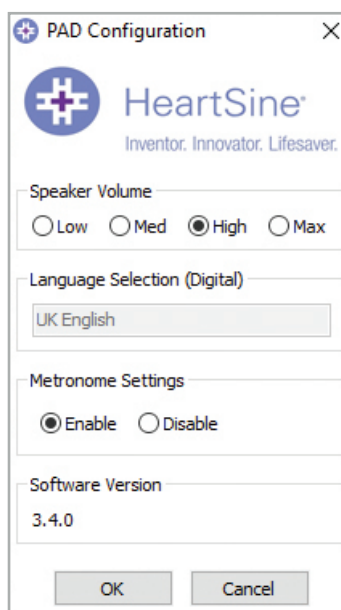

Okno Saver EVO edit PAD configuration (Edytuj konfigurację PAD oprogramowania Saver EVO)

Korzystanie z oprogramowania Saver EVO z PDU*

1. Aby używać oprogramowania Saver EVO z kartą pamięci urządzenia samarytan PDU, należy włożyć kartę do czytnika kart kompatybilnego z MMC/SD, który jest podłączony lub wbudowany w komputer z oprogramowaniem Saver EVO. Należy pamiętać, że rozpoznanie obecności karty w czytniku kart przez system operacyjny komputera może potrwać kilka sekund, a nawet ponad minutę.
2. Na ekranie startowym kliknij przycisk samarytan PDU. Otworzy się poniższe okno.



Ekran dostępu do Saver EVO PDU



PDU Data (Dane PDU) - Kliknij ten przycisk, aby pobrać dane zdarzenia z karty pamięci PDU. Szczegóły znajdują się na stronie 13.



PDU Settings (Ustawienia PDU) - Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić ustawienia konfiguracji. Szczegóły znajdują się na stronie 15.



Back (Wstecz) – Przycisk służy do powrotu do ekranu startowego Saver EVO.

* Urządzenie samarytan PDU nie było dostępne w USA i nie jest już produktem oferowanym przez firmę HeartSine.

Pobieranie danych zdarzenia z karty pamięci PDU

Upewnij się, że karta pamięci urządzenia samaritan PDU jest włożona do czytnika kart SD/MMC i kliknij przycisk PDU Data (Dane PDU). Spowoduje to wyświetlenie zdarzeń zapisanych na karcie pamięci.



Ekran listy dziennika zdarzeń Saver EVO PDU

Zdarzenia z symbolem zegara 🕒 to autotesty PDU, które zakończyły się powodzeniem.

Zdarzenia wyświetlone na zielono z symbolem ✓ to zdarzenia, które zostały już zapisane w komputerze.



Save all (Zapisz wszystko) - W trybie PDU ten przycisk jest wyłączony.



View (Wyświetl) – Przycisk służy do wyświetlenia wybranego zdarzenia. Szczegóły znajdują się na stronie 13.




Erase (Skasuj) - W trybie PDU ten przycisk jest wyłączony.



Back (Wstecz) – Przycisk służy do powrotu do ekranu startowego Saver EVO PDU.

Wyświetlanie zdarzeń zapisanych na karcie pamięci PDU

1. Aby wyświetlić zdarzenie, zaznacz je na liście, a następnie kliknij przycisk View (Wyświetl). Spowoduje to wyświetlenie zdarzenia defibrylacji wraz z zapisem EKG i dziennika zdarzeń w jednym oknie podglądu:

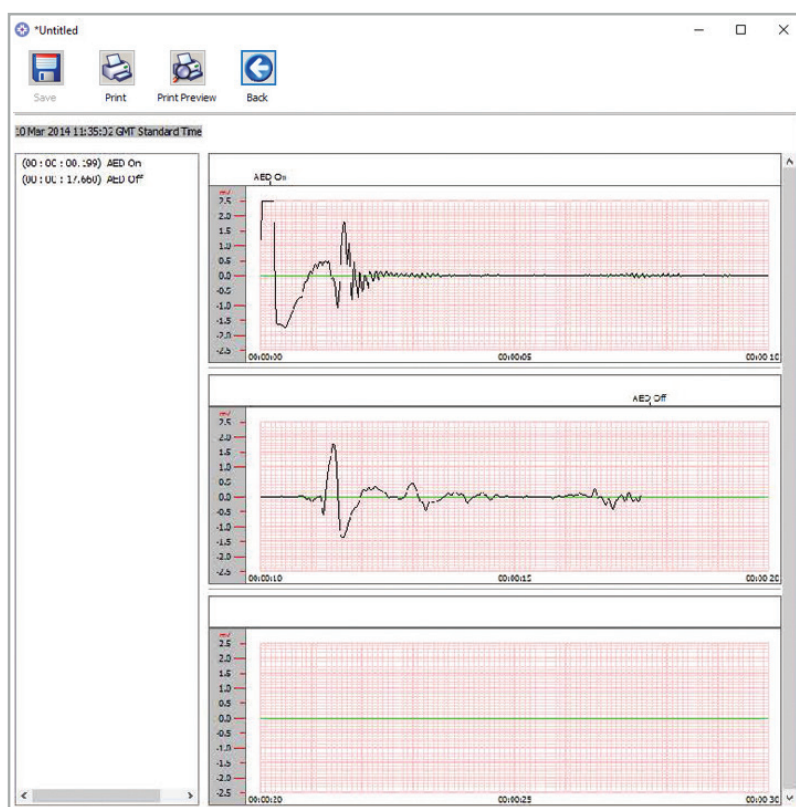

Okno podglądu zdarzeń Saver EVO PDU

2. Użytkownik może teraz wybrać zapisanie tego wyświetlonego zdarzenia w komputerze, klikając przycisk Save (Zapisz). Zapewnia to opcje wprowadzania informacji umożliwiających identyfikację pacjenta. Dane dotyczące pacjenta mogą składać się ze znaków alfanumerycznych oraz każde pole można wypełnić lub w razie potrzeby pozostawić puste.

Okno danych pacjenta Saver EVO PDU

UWAGA: Po zapisaniu danych zdarzenia defibrylacji w komputerze nie można ich zmienić.

Okno podglądu zdarzeń Saver EVO zawiera również następujące przyciski:



Print (Drukuj) – Przycisk służy do drukowania zdarzenia aktualnie wyświetlanego w oknie widoku.




Print Preview (Podgląd wydruku) – Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie podglądu danych wydruku na ekranie.



Back (Wstecz) – Przycisk służy do powrotu do ekranu listy zdarzeń Saver EVO PDU.

Podgląd ustawień PDU

Kliknięcie przycisku View Settings (Podgląd ustawień) spowoduje przejście do następującego ekranu konfiguracji PDU. Ten ekran umożliwia użytkownikowi podgląd poziomu naładowania baterii, głośności głośnika, ustawień języka i metronomu, szybkości i czasu reanimacji oraz daty ważności, wersji oprogramowania i numeru seryjnego urządzenia PDU. Użytkownik może tylko przeglądać te ustawienia i nie może dokonywać żadnych zmian.

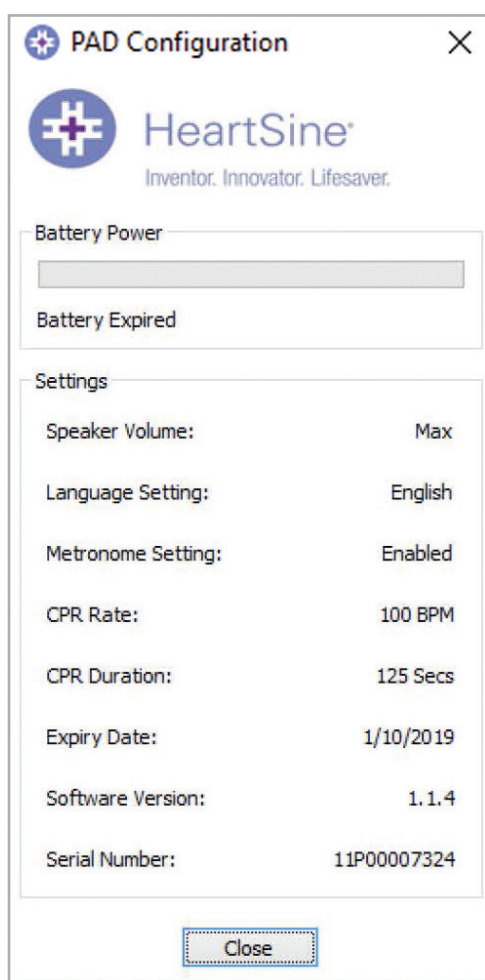


Saver EVO wyświetla okno ustawień PDU

Korzystanie z oprogramowania Saver EVO z zapisanymi zdarzeniami

Przycisk Manage Saved Events (Zarządzaj zapisanymi zdarzeniami) na głównym ekranie Saver EVO umożliwia przeglądanie danych o zdarzeniach, które zostały pobrane z urządzenia HeartSine samaritan PAD, baterii zestawu Data-Pak lub karty pamięci PDU i zapisane w komputerze.

1. Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna w następujący sposób:

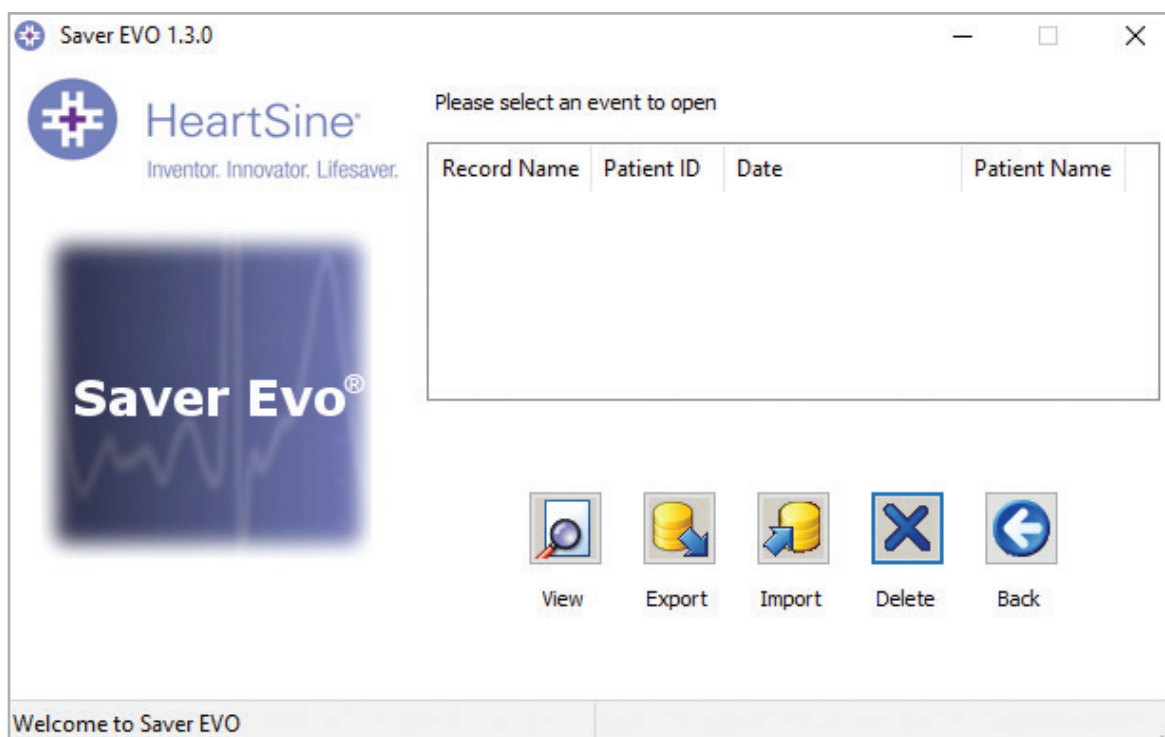

2. Zaznaczenie zdarzenia na liście i kliknięcie opcji View (Wyświetl) spowoduje otwarcie zapisanego zdarzenia w celu wyświetlenia danych EKG i dziennika zdarzeń.

Eksport i import

Oprogramowanie Saver EVO wyposażone jest w funkcje, które pozwalają użytkownikom wysyłać lub odbierać dane o zdarzeniach związanych z defibrylacją innym osobom, które dysponują oprogramowaniem Saver EVO. Do wysyłania lub odbierania kopii zapisanych zdarzeń służy funkcja eksportu i importu oprogramowania Saver EVO.

Aby eksportować zdarzenia:

1. Na ekranie Manage Saved events (Zarządzaj zapisanymi zdarzeniami) zaznacz zdarzenie lub kilka zdarzeń, które mają być wyeksportowane, a następnie kliknij przycisk Export (Eksportuj).
2. Komputer zapyta o lokalizację w komputerze, w której ma być zapisany eksportowany plik, a także pozwoli wybrać nazwę eksportowanego pliku.
3. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać plik w wybranej lokalizacji.

Następnie można dołączyć ten plik do wiadomości e-mail za pomocą zwykłego oprogramowania do obsługi poczty e-mail i wysłać wyeksportowany plik do innego użytkownika, który dysponuje oprogramowaniem Saver EVO.

Dane zdarzeń z oprogramowania Saver EVO mogą być przeglądane tylko przez innego użytkownika Saver EVO. Poprzednie oprogramowanie Saver nie importowało i nie wyświetlało danych z oprogramowania Saver EVO.

Aby importować zdarzenia:

Aby zaimportować zdarzenia i wyświetlić je w komputerze, plik wysłany do użytkownika przez innego użytkownika oprogramowania Saver lub Saver EVO należy zapisać w lokalizacji w komputerze.

1. Na ekranie Manage Saved Events (Zarządzaj zapisanymi zdarzeniami) oprogramowania Saver EVO kliknij przycisk Import (Importuj).
2. Przejdź do lokalizacji, w której plik został zapisany i kliknij opcję Open (Otwórz).
3. Rekordy zostaną dodane do listy plików oprogramowania Saver EVO w komputerze.

Można je następnie wyświetlić, zaznaczając zdarzenie na liście i klikając przycisk View (Wyświetl).

Oprogramowanie Saver EVO poprawnie zaimportuje i wyświetli dane zdarzeń wyeksportowane z poprzedniej wersji oprogramowania o nazwie Saver.

Aby usunąć zapisane zdarzenia

Zapisane zdarzenia można usunąć z pamięci komputera za pomocą oprogramowania Saver EVO. Zdarzenia są usuwane indywidualnie poprzez wybranie zdarzenia (zdarzeń), które mają zostać usunięte (można wybrać wiele zdarzeń) poprzez wyróżnienie odpowiedniego zdarzenia.


Po potwierdzeniu, że wybrano tylko zdarzenia, które mają być usunięte, kliknij przycisk Erase (Skasuj). W celu zachowania ostrożności przed skasowaniem pamięci Saver EVO poprosi o podanie hasła. Po wprowadzeniu prawidłowego hasła pamięć wybranych zdarzeń zostanie usunięta z komputera.

Przeostroga: Przed skasowaniem upewnij się, że zostały wybrane tylko te zdarzenia, które chcesz skasować. Po usunięciu ich z pamięci komputera, zdarzenia nie będą mogły zostać odtworzone, a wszystkie informacje zostaną utracone.


Zmiana ustawień oprogramowania Saver EVO

Oprogramowanie Saver EVO wyposażone jest w pewne funkcje, które można zmienić lub uzupełnić tylko poprzez wprowadzenie hasła. Pozwala to administratorom oprogramowania ograniczyć dostęp do niektórych możliwości do autoryzowanych użytkowników. Po instalacji oprogramowania Saver EVO domyślnym hasłem jest „password”.

Aby zmienić hasło:

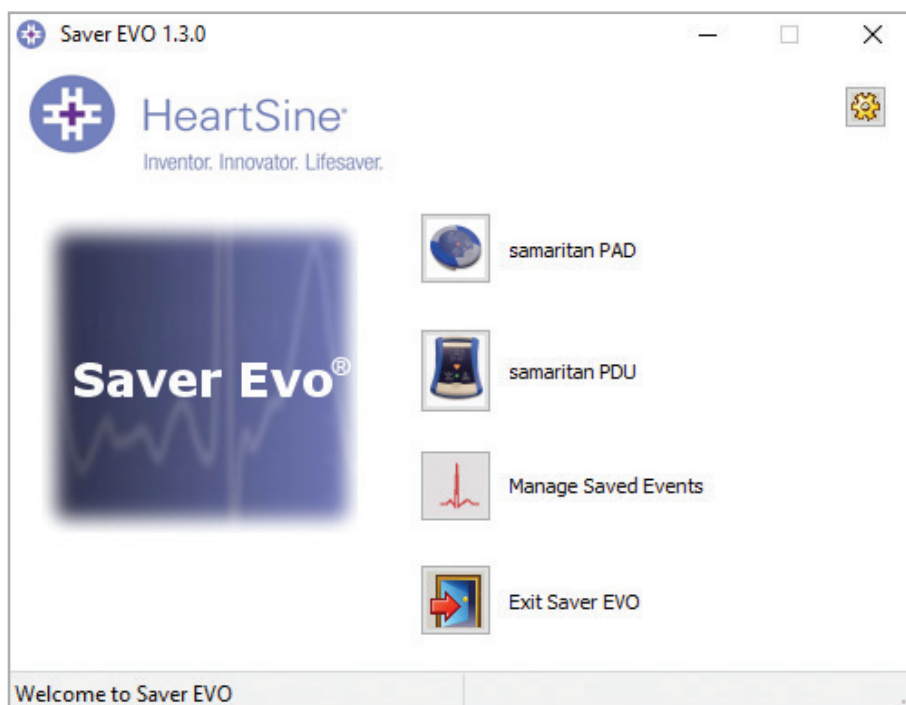

1. Na głównym ekranie oprogramowania Saver EVO kliknij mały przycisk Settings (Ustawienia). Spowoduje to otwarcie następującego okna:

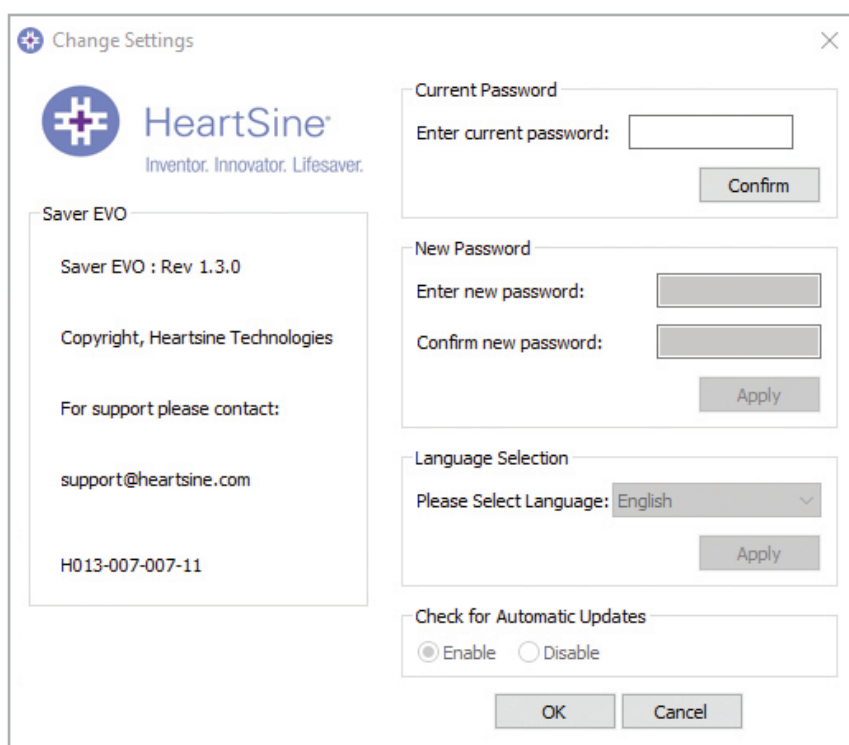


Ekran Change Settings (Zmień ustawienia)

2. Wprowadź aktualne hasło i kliknij Confirm (Potwierdź).
3. Wprowadź dwukrotnie nowe hasło i kliknij Apply (Zastosuj), aby wprowadzić zmianę.
4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Change Password (Zmień hasło).


UWAGA: Ponowna instalacja oprogramowania Saver EVO spowoduje w oprogramowaniu zresetowanie hasła do hasła domyślnego. Ta czynność nie spowoduje jednak usunięcia wcześniej zapisanych danych zdarzeń.

Aby zmienić język oprogramowania Saver EVO:

1. Aby wybrać język oprogramowania Saver EVO, wybierz język z listy rozwijanej i kliknij Apply (Zastosuj).

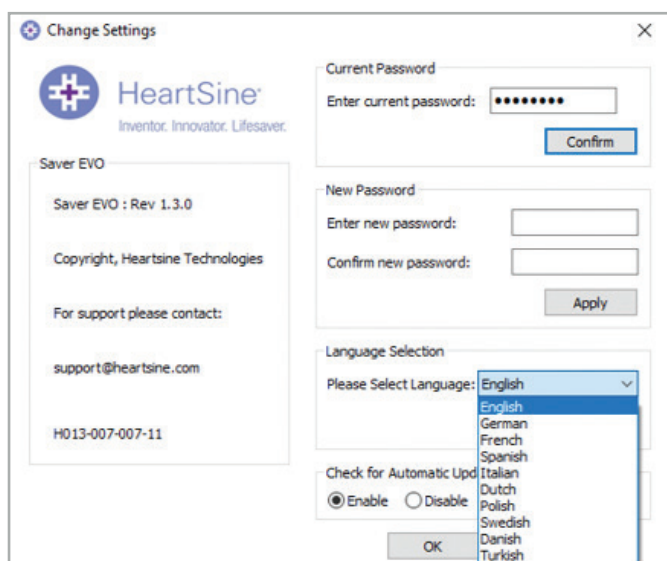

2. Po kliknięciu Apply (Zastosuj) pojawi się następujący ekran i oprogramowanie Saver EVO musi zostać ponownie uruchomione, aby zmiany języka zostały wprowadzone.

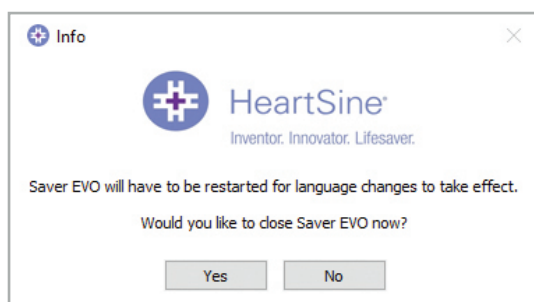

3. Kliknij odpowiednio Yes (Tak) lub No (Nie), aby zamknąć oprogramowanie Saver EVO.

Aby sprawdzić dostępność automatycznych aktualizacji:

1. Jeśli przy każdym uruchomieniu oprogramowania Saver EVO zaznaczone zostanie pole Enable (Włącz), oprogramowanie spróbuje połączyć się ze stroną internetową HeartSine, aby sprawdzić, czy dostępne są nowsze wersje oprogramowania Saver EVO. Jeśli aktualizacja jest dostępna, po uruchomieniu oprogramowania Saver EVO zostanie wyświetlone następujące okno.



2. Wybierz Yes (Tak) lub No (Nie), jeśli chcesz pobrać nowszą wersję oprogramowania Saver EVO.

Cyberbezpieczeństwo

- Upewnij się, że w komputerze zastosowano wszystkie poprawki bezpieczeństwa Microsoft.
- Regularnie twórz kopie zapasowe w komputerze (w tym pliki oprogramowania Saver EVO).
- Zaleca się, aby w komputerze było zainstalowane aktywne i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe/anty-malware.
- Aby zalogować się do komputera, użyj silnego hasła. Hasło powinno składać się z wielkich i małych liter oraz zawierać cyfry i symbole.

W celu uzyskania dalszych informacji, można się z nami skontaktować pod adresem heartsinesupport@stryker.com lub odwiedzić naszą stronę internetową heartsine.com.



HeartSine Technologies, Ltd.
203 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
Wielka Brytania
Tel +44 28 9093 9400
Faks +44 28 9093 9401

**Dział obsługi klienta w USA/
Ameryce Płd.**

11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 USA
Tel (połączenie bezpłatne) 866 478 7463
Tel +1 215 860 8100
Faks +1 215 860 8192

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
© 2020 HeartSine Technologies.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
H013-001-306-4 PO